



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Geronteck Education and Rental Service Centre

# 防跌感應套裝

## GM

防跌感應套裝 - GM

### 01 器材介紹

- 防跌感應套裝可以讓使用者從坐椅或床邊發生跌倒意外時，感應器自動發出求助信號給照顧者
- 而照顧者亦可以透過接收器發出的聲響或燈光提示，適時地提供援助



互聯網接收器

多重接收器

便攜式接收器

護士呼叫按鈕


床墊

無線監測警報器

椅墊

### 照顧者呼叫按鈕

- 照顧者呼叫按鈕可以接駁無線監測警示器使用，成為無線緊急呼叫
- 系統呼叫按鈕設於把手頂端，當需要求助時，按下按鈕，警示器會發出警報響聲及閃燈提示

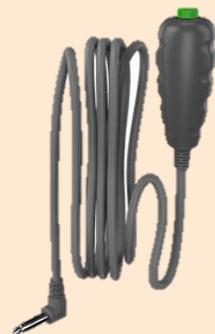

## 無線監測警示器



- ▶ 無線監測警示器配有不同按鈕,可控制電源開關、傳輸、燈光及聲量提示
- ▶ 將警示器放於感應墊附近,系統會將使用者的離床感應信號傳送至接收器
- ▶ 當接收到感應墊的離床感應信號時,警示器會發出警報響聲提示及閃燈提示附近的照顧者
- ▶ 如需要關閉響鬧提示,可連按兩下警示器表面的「Reset-Test」按鈕
- ▶ 警示器亦可接駁照顧者呼叫按鈕使用,轉換成無線緊急呼叫系統,收到求救信號時,同樣會發出警報響聲及閃燈提示 (見上頁)



## 感應床墊及椅墊

- ▶ 感應墊採用無線、軟墊及防水濺設計，讓使用者可以安全且舒適地將其放置於所需範圍內  
(感應墊的擺放位置已經由治療師評估，轉換位置前請先向中心職員查詢)
- ▶ 坐墊的大小是15"x10"，床墊的大小是30"x20"
- ▶ 使用者只需按照日常的坐姿及睡姿使用即可，無須特別技巧




- ▶ 感應墊的主要模式分為兩種，可於警報器背部的模式選擇按鈕中選取：

### 1. 即時性離床感應模式

當使用者離開感應墊時，系統會馬上發送離床感應通知至警示器

### 2. 延遲性離床感應模式

當使用者離開感應墊時，系統會延遲3秒才發送離床感應通知至警示器，以減少發生誤報的情況

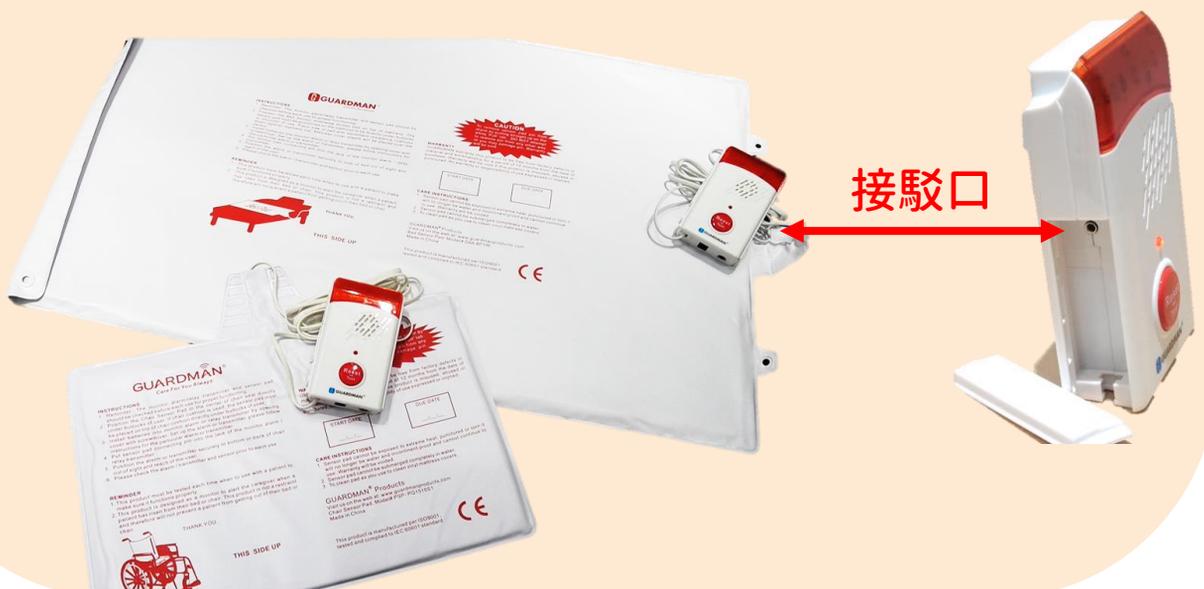

## 便攜式接收器

- ▶ 便攜式接收器體積細小，內置皮帶夾及電池式設計，方便隨身攜帶使用
- ▶ 接收器配有按鈕設定震動及聲音提示
- ▶ 可配對4種不同的感應器，讓照顧者可以留意使用者在不同環境下的活動情況
- ▶ 當接收到由警示器發出的離床感應信號時，接收器會發出振動及響鬧提示
- ▶ 同時設有指示燈，提示照顧者警報信號發出的感應器裝置來源
- ▶ 若需要關閉響鬧提示，只需接下接收器正面的「Reset」鍵即可
- ▶ 如接收器每5秒便發出「呔」的聲響，代表需更換電池



## 多重接收器

- ▶ 多重接收器採用電池式設計，配有不同的獨立按鈕，可控制電源開關及聲量控制接收器
- ▶ 可配對4種不同的感應器，讓照顧者可以留意使用者在不同環境下的活動情況
- ▶ 當接收到由警示器發出的離床感應信號時，接收器會發出燈光及響鬧提示
- ▶ 同時設有指示燈界面，提示照顧者警報信號發出的感應器裝置來源




## 互聯網接收器

- 家居監察及警報系統是由感應器、互聯網接收器及應用程式(eAlertCare™ app)配合使用的家居裝置
- eAlertCare™ app是一個可遠程觀察及管理的應用程式，方便觀察使用者的活動情況，並接收推送通知
- 應用程式需連接互聯網使用，即使沒有互聯網連接，多重接收器亦設有指示燈界面，接收到警報信號也可發出響鬧及燈光提示
- 照顧者可透過應用程式查詢感應器的所在區域並於接收到警報信號後顯示發出位置
- 同時亦可以查看活動紀錄，讓照顧者更容易掌握家居情況
- 如需要關閉響鬧提示，按一下機座背後的長形按鈕即可
- 照顧者可自訂和管理各種相應的家居安全照護系統裝置，減輕負擔及建立更安全舒適的家居生活

燈光提示



指示燈

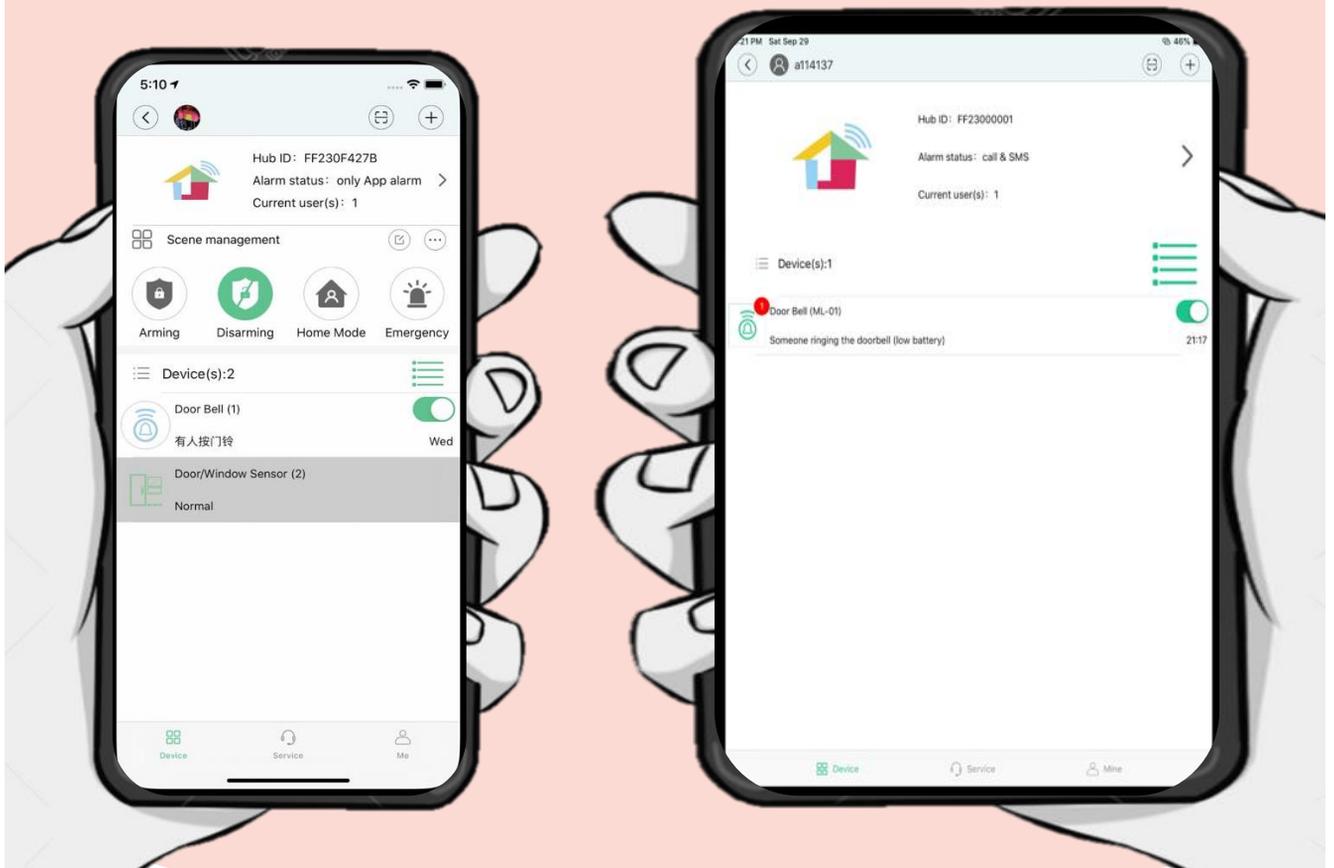

## 02 清潔及保養

- 清潔時,可用已扭乾水的濕布或酒精擦拭,並讓其自然揮發
- 請勿使用漂白水、高溫熱水或酸性清潔劑等擦拭,以免損壞器材表面
- 床墊、椅墊、警示器及接收器等表面均屬防水物料,但仍要注意切勿讓水流入電池盒當中
- 長時間閒置時,建議先關機然後將電池取走,避免電池變質影響運作
- 存放時,應避免擺放於濕滑、長期曝曬或接近火源的地方

## 03 器材清單



- 無線監測警示器
- 照顧者呼叫按鈕
- 感應椅墊
- 感應床墊
- 便攜式接收器
- 多重接收器
- 互聯網接收器

\*\*實際使用方法需要按照使用者的個別能力,使用者請勿自行改動防跌感應套裝 - GM, 如有疑問,請向中心職員查詢\*\*

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

